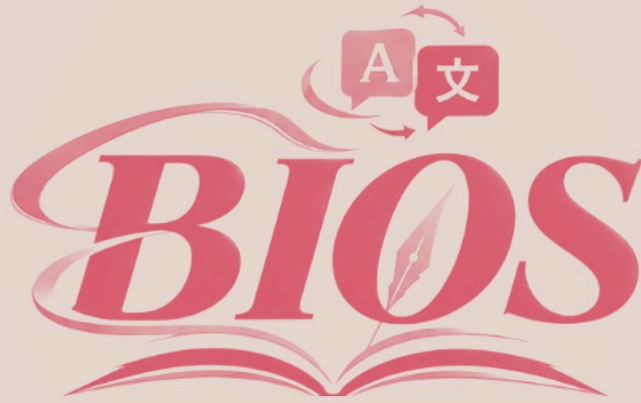




Practical Immunology علم المناعة العملي

Lab 1 – Exam & Questions

بنك الأسئلة

Department
القسم

تقنيات المختبرات الطبية

Stage
المرحلة

The third stage – الثالثة

Type
النوع

أسئلة – Questions

Prepared by
إعداد

محمد حامد

Instructor
تدريسية المادة

م.م. جنان خليل

LAB
1

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

EN

Immunity is defined as:

Q1

س 1. تُعرّف المناعة بأنها:

AR

- a Body defense against foreign agent
- b Production of red blood cells
- c Clotting of blood
- d Transport of oxygen

دفاع الجسم ضد العامل الغريب

إنتاج كريات الدم الحمراء

تخثر الدم

نقل الأوكسجين

EN

The immune response is divided into:

Q2

س 2. تُقسم الاستجابة المناعية إلى:

AR

- a Innate and acquired only
- b Plasma and serum
- c Cellular and humoral immunity
- d Red and white

فطرية ومكتسبة فقط

بلازما ومصل

مناعة خلوية ومناعة خلطية

حمراء وبيضاء

EN

Humoral immunity is related to the action of:

Q3

س 3. ترتبط المناعة الخلطية بعمل:

AR

- a Red blood cells
- b Some proteins, cytokines and immunoglobulin
- c Platelets only
- d Saline

كريات الدم الحمراء

بعض البروتينات والسيتوكينات والغلوبيولينات المناعية

الصفائح الدموية فقط

المحلول الملحي

EN Cellular immunity is related to:

Q4

AR س4. ترتبط المناعة الخلوية بـ:

- | | | |
|---|--|-------------------------------|
| a | Fibrinogen | الفايبرينوجين |
| b | Electrolytes | الأملاح المتأينة |
| c | Dextrose | الدكستروز |
| d | The activity of cells of the immune response | نشاط خلايا الاستجابة المناعية |

EN Which of the following is NOT listed as a lab sample?

Q5

AR س5. أي مما يأتي ليس من العينات المختبرية المذكورة؟

- | | | | | | |
|---|--------|--------|---|---------------------|-----------------------|
| a | Blood | الدم | b | Urine | الإدرار |
| c | Saliva | اللعاب | d | Cerebrospinal fluid | السائل الدماغي الشوكي |

EN Plasma makes up about what percentage of the total blood volume?

Q6

AR س6. تشكّل البلازما نحو أي نسبة من الحجم الكلي للدم؟

- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| a | 45% | b | 55% |
| c | 65% | d | 85% |

EN The colour of plasma is:

Q7

AR س7. لون البلازما:

- | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|---|------------|------------|
| a | Red | أحمر | b | Colourless | عديم اللون |
| c | Yellowish | مائل إلى الصفرة | d | Brown | بني |

EN The proteins carried by plasma include:

Q8

AR س8. تشمل البروتينات التي تحملها البلازما:

- | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| a | Albumin, globulin and fibrinogen | الألبومين والغلوبيولين والفايبرينوجين |
| b | Hemoglobin only | الهيموغلوبين فقط |
| c | Dextrose and citrate | الدكستروز والسترات |
| d | Keratin and collagen | الكيراتين والكولاجين |

EN Serum is blood plasma NOT including:

Q9

AR س9. المصل هو بلازما الدم من دون:

- | | | | | | |
|---|----------|------------|---|-------------|-----------------|
| a | Albumin | الألبومين | b | Antibodies | الأجسام المضادة |
| c | Hormones | المهرمونات | d | Fibrinogens | الفايبرينوجين |

EN Serum is obtained:

Q10

AR س10. يُحصَل على المصل:

- | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|---|----------------|-------------------|
| a | Before clotting | قبل التخيّر | b | After clotting | بعد التخيّر |
| c | From urine | من الإدرار | d | From saline | من المحلول الملحي |

EN To collect plasma, blood is put in a tube:

Q11

AR س11. لجمع البلازما يوضع الدم في أنبوب:

- | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| a | With anticoagulant substance | يحتوي مادة مانعة للتخيّر |
| b | Without anticoagulant substance | من دون مادة مانعة للتخيّر |
| c | With dextrose only | يحتوي دكستروز فقط |
| d | Plain tube only | أنبوب عادي فقط |

EN Which tube is used for serum collection?

Q12

س12. أي أنبوب يُستعمل لجمع المصل؟

AR

- a EDTA tube أنبوب EDTA
- b Sodium citrate tube أنبوب سترات الصوديوم
- c Plain tube or Gel tube أنبوب عادي أو أنبوب هلامي
- d Heparin tube أنبوب الهيبارين

EN Which of the following is an anticoagulant used for plasma collection?

Q13

س13. أي مما يأتي مانع تخثر يُستعمل لجمع البلازما؟

AR

- a Gel الهلام
- b NaCl كلوريد الصوديوم
- c Dextrose الدكستروز
- d EDTA

EN In preparation of erythrocytes, blood is collected by:

Q14

س14. في تحضير كريات الدم الحمراء، يُجمع الدم بطريقة:

AR

- a Vein puncture method البزل الوريدي
- b Finger prick only وخز الإصبع فقط
- c Arterial puncture only البزل الشرياني فقط
- d Urine collection جمع الإدرار

EN The RBC suspension is washed by centrifugation for:

Q15

س15. يُغسل معلق كريات الدم الحمراء بالطرد المركزي مدة:

AR

- a 1 min. at 1000 rpm دقيقة واحدة بسرعة 1000 دورة/دقيقة
- b 5 min. at 3000 rpm 5 دقائق بسرعة 3000 دورة/دقيقة
- c 10 min. at 5000 rpm 10 دقائق بسرعة 5000 دورة/دقيقة
- d 30 min. at 300 rpm 30 دقيقة بسرعة 300 دورة/دقيقة

EN After centrifugation, the supernatant is:

Q16

س16. بعد الطرد المركزي، يُعامل الطافي بأن:

AR

a Kept and mixed with blood

يُحتفظ به ويُمزج بالدم

b Frozen

يُجمّد

c Discarded

يُتخلّص منه

d Added to Alsever's solution

يُضاف إلى محلول ألسيفر

EN Blood is preserved for a LONG time in:

Q17

س17. يُحفظ الدم لمدة طويلة في:

AR

a Saline

المحلول الملحي

b Distilled water

الماء المقطّر

c Urine

الإدرار

d Alsever 's solution

محلول ألسيفر

EN The concentration of NaCl in normal saline is:

Q18

س18. تركيز كلوريد الصوديوم في المحلول الملحي الطبيعي:

AR

a 0.85%

b 8.5%

c 0.42%

d 2.05%

EN Normal saline is prepared by dissolving 8.5 g of NaCl in:

Q19

س19. يُحضّر المحلول الملحي الطبيعي بإذابة 8.5 غ من NaCl في:

AR

a 100 ml of D.W.

100 مل من الماء المقطّر

b 1 liter of D.W.

لتر واحد من الماء المقطّر

c 10 liters of D.W.

10 لترات من الماء المقطّر

d 1 liter of plasma

لتر واحد من البلازما

EN In Alsever 's solution, dextrose acts as a:

Q20

AR س 20. في محلول ألسيفر، يعمل الدكستروز بوصفه:

- a pH control ضابطاً للأس الهيدروجيني
- b Anticoagulant مانعاً للتخثر
- c Preservative مادة حافظة
- d Osmotic controller منظماً للضغط الأزموزي

EN In Alsever 's solution, sodium chloride is used for:

Q21

AR س 21. في محلول ألسيفر، يُستعمل كلوريد الصوديوم لـ:

- a Controlling the osmotic pressure التحكم بالضغط الأزموزي
- b pH control ضبط الأس الهيدروجيني
- c Preservation الحفظ
- d Clotting التخثر

EN The anticoagulant in Alsever 's solution is:

Q22

AR س 22. مانع التخثر في محلول ألسيفر هو:

- a Dextrose الدكستروز
- b Citric acid حامض الستريك
- c Sodium chloride كلوريد الصوديوم
- d Sodium citrate سترات الصوديوم

EN The tourniquet is placed above the venipuncture site by about:

Q23

AR س 23. يوضع الرباط الضاغط فوق موضع سحب الدم بنحو:

- a 1 finger إصبع واحد
- b 3-4 fingers 3-4 أصابع
- c 10 fingers 10 أصابع
- d At the site itself على الموضع نفسه

EN The patient is asked to form a fist so that:

Q24

AR س24. يُطلب من المريض أن يقبض يده لكي:

- a The skin becomes clean يصبح الجلد نظيفاً
- b The blood clots يتخثر الدم
- c Veins are more prominent تصبح الأوردة أكثر بروزاً
- d The needle cap is removed يُنزع غطاء الإبرة

EN In venipuncture, the thumb is used to:

Q25

AR س25. في سحب الدم الوريدي، يُستعمل الإبهام لـ:

- a Draw skin tight شد الجلد
- b Remove the needle cap نزع غطاء الإبرة
- c Label the tube كتابة بيانات الأنبوب
- d Find the pulse تحسس النبض

EN Which of the following is a procedure used to prevent microorganism transmission?

Q26

AR س26. أي مما يأتي من الإجراءات المستعملة لمنع انتقال المجهريّة؟

- a Mixing samples مزج العينات
- b Leaving wastes in the lab ترك النفايات في المختبر
- c Removing labels إزالة الملصقات
- d Hand washing غسل اليدين

EN Which of the following is NOT one of the safety instructions in the immunology laboratory? Q27

AR س27. أي مما يأتي ليس من تعليمات السلامة في مختبر المناعة؟

- a Wearing gloves ارتداء القفازات
- b Leaving wastes inside the laboratory ترك النفايات داخل المختبر
- c Sample and solution labeling وضع الملصقات على العينات والمحاليل
- d Wearing face glasses ارتداء نظارات الوجه

2

True / False

صح أو خطأ

EN Humoral immunity is related to the activity of cells of the immune response. 1

True • صح

False • خطأ

AR ترتبط المناعة الخلطية بنشاط خلايا الاستجابة المناعية.

EN Cerebrospinal fluid is one of the lab samples. 2

True • صح

False • خطأ

AR السائل الدماغي الشوكي من العينات المختبرية.

EN Plasma makes up about 55% of the body's total blood volume. 3

True • صح

False • خطأ

AR تشكّل البلازما نحو 55% من الحجم الكلي لدم الجسم.

EN Serum contains fibrinogen. 4

True • صح

False • خطأ

AR يحتوي المصل على الفايبرينوجين.

EN Serum includes antibodies, antigens and hormones. 5

True • صح

False • خطأ

AR يضم المصل الأجسام المضادة والمستضدات والهرمونات.

EN Serum is collected in a tube containing EDTA.

6

True • صح

False • خطأ

يُجمع المصل في أنبوب يحتوي EDTA.

AR

EN A gel tube is used for serum collection.

7

True • صح

False • خطأ

يُستعمل الأنبوب الهلامي لجمع المصل.

AR

EN In preparing erythrocytes, a hypertonic solution is added to the mixture.

8

True • صح

False • خطأ

عند تحضير كريات الدم الحمر يُضاف محلول عالي التوتر إلى المزيج.

AR

EN RBCs are washed by centrifugation for 5 min. at 3000 rpm.

9

True • صح

False • خطأ

تُغسل كريات الدم الحمر بالطرد المركزي مدة 5 دقائق بسرعة 3000 دورة/دقيقة.

AR

EN Blood can be preserved in saline for a long time.

10

True • صح

False • خطأ

يمكن حفظ الدم في المحلول الملحي لمدة طويلة.

AR

EN Normal saline keeps the cells as they are.

11

True • صح

False • خطأ

يحافظ المحلول الملحي الطبيعي على الخلايا كما هي.

AR

EN Citric acid in Alsever's solution is used for pH control.

12

True • صح

False • خطأ

يُستعمل حامض الستريك في محلول ألسيفر لضبط الأس الهيدروجيني.

AR

EN The tourniquet is placed directly on the venipuncture site.

13

True • صح

False • خطأ

يوضع الرباط الضاغط مباشرة على موضع سحب الدم.

AR

EN The vein is cleaned before it is found.

14

True • صح

False • خطأ

AR يُنظف الموضع قبل تحديد الوريد.

AR

EN Isolating highly infective or highly susceptible patients helps prevent microorganism transmission.

15

True • صح

False • خطأ

AR يساعد عزل المرضى شديدي العدوى أو شديدي القابلية للإصابة على منع انتقال الأحياء المجهرية.

AR

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN Plasma and serum are the same fluid. Correct?

1

AR البلازما والمصل السائل نفسه. هل هذا صحيح؟

AR

EN Serum is collected in a tube with anticoagulant. Correct?

2

AR يُجمع المصل في أنبوب يحتوي مانعاً للتخثر. هل هذا صحيح؟

AR

EN Saline is used to preserve blood for a long time. Correct?

3

AR يُستعمل المحلول الملحي لحفظ الدم لمدة طويلة. هل هذا صحيح؟

AR

EN Normal saline is 8.5% NaCl. Correct?

4

AR المحلول الملحي الطبيعي هو NaCl بتركيز 8.5%. هل هذا صحيح؟

AR

EN In Alsever 's solution, sodium chloride is the anticoagulant. Correct?

5

AR في محلول ألسيفر، كلوريد الصوديوم هو مانع التخثر. هل هذا صحيح؟

AR

EN Cellular immunity depends on immunoglobulins. Correct?

6

AR تعتمد المناعة الخلوية على الغلوبولينات المناعية. هل هذا صحيح؟

AR

EN During RBC washing, the precipitate is discarded. Correct?

7

AR أثناء غسل كريات الدم الحمراء، يُتخلَّص من الراسب. هل هذا صحيح؟

AR

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define immunity and state its two types.

1

AR عرّف المناعة واذكر نوعيها.

AR

EN Differentiate between plasma and serum.

2

AR فرق بين البلازما والمصل.

AR

EN List the lab samples mentioned in the lecture.

3

AR عدّد العينات المختبرية المذكورة في المحاضرة.

AR

EN Write the steps of preparation of erythrocytes.

4

AR اكتب خطوات تحضير كريات الدم الحمراء.

EN What are the components of Alsever 's solution and the role of each?

5

AR ما مكونات محلول ألسيفر ودور كل منها؟

EN Write the steps of the venipuncture procedure.

6

AR اكتب خطوات سحب الدم الوريدي.

EN List the safety instructions in the immunology laboratory.

7

AR عدد تعليمات السلامة في مختبر المناعة.

5

Answer Key

الحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 C	3 B	4 D	5 C	6 B	7 C	8 A
9 D	10 B	11 A	12 C	13 D	14 A	15 B	16 C
17 D	18 A	19 B	20 C	21 A	22 D	23 B	24 C
25 A	26 D	27 B					

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 True
13 False	14 False	15 True			

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN No. Serum is plasma **not including the fibrinogens** — it is the fluid left after clotting. 1

AR لا. المصل هو البلازما **من دون الفايبرينوجين** — أي السائل المتبقي بعد التخثر.

EN No. **Plasma** → tube **with** anticoagulant (EDTA, sodium citrate); **serum** → tube **without** anticoagulant (plain tube, gel tube). 2

AR لا. **البلازما** ← أنبوب **فيه** مانع تخثر (EDTA، سترات الصوديوم)؛ **المصل** ← أنبوب **من دون** مانع تخثر (أنبوب عادي، أنبوب هلامي).

EN No. Saline → **short** time; Alsever 's solution → **long** time. 3

AR لا. المحلول الملحي ← مدة **قصيرة**؛ محلول ألسيفر ← مدة **طويلة**.

EN No. It is **0.85%** — that is 8.5 **gram** of NaCl in 1 liter of D.W. 4

AR لا. التركيز **0.85%** — أي **8.5 غرام** من NaCl في لتر واحد من الماء المقطر.

EN No. **Sodium citrate** is the anticoagulant; sodium **chloride** controls the osmotic pressure; dextrose is the preservative; citric acid controls pH. 5

AR لا. **سترات الصوديوم** هي مانع التخثر؛ أما **كلوريد الصوديوم** فيتحكم بالضغط الأزموزي، والدكستروز مادة حافظة، وحامض الستريك يضبط الأس الهيدروجيني.

EN No. Immunoglobulins, cytokines and some proteins belong to **humoral** immunity; cellular immunity is the activity of **cells** of the immune response. 6

AR لا. الغلوبولينات المناعية والسيتوكينات وبعض البروتينات تخص المناعة **الخلطية**؛ أما المناعة الخلوية فهي نشاط **خلايا** الاستجابة المناعية.

EN No. The **supernatant** is discarded; saline is added again to the **precipitate** (the RBCs). 7

AR لا. يُتخلَّص من **الطافي**؛ ويُضاف المحلول الملحي مرة أخرى إلى **الراسب** (كريات الدم الأحمر).

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Define immunity and state its two types.** 1

Body defense against foreign agent. Cellular immunity (activity of cells of the immune response) and humoral immunity (action of some proteins, cytokines and immunoglobulin).

AR دفاع الجسم ضد العامل الغريب. المناعة الخلوية (نشاط خلايا الاستجابة المناعية) والمناعة الخلطية (عمل بعض البروتينات والسيتوكينات والغلوبولينات المناعية).

EN **Differentiate between plasma and serum.** 2

Plasma: yellowish liquid part of blood carrying cells and proteins (albumin, globulin, fibrinogen), about 55% of blood volume; collected with anticoagulant. Serum: fluid after clotting, plasma without fibrinogens; collected without anticoagulant.

AR البلازما: الجزء السائل المائل إلى الصفرة من الدم، تحمل الخلايا والبروتينات (الألبومين، الغلوبولين، الفايبرينوجين)، وتشكل نحو 55% من حجم الدم؛ وتُجمع بأنبوب فيه مانع تخثر. المصل: السائل بعد التخثر، أي البلازما من دون الفايبرينوجين؛ ويُجمع بأنبوب من دون مانع تخثر.

EN List the lab samples mentioned in the lecture.

3

Blood (serum – plasma – RBCs), urine and cerebrospinal fluid.

الدم (المصل - البلازما - كريات الدم الحمراء)، والإدرار، والسائل الدماغي الشوكي.

AR

EN Write the steps of preparation of erythrocytes.

4

1) Collect blood by vein puncture. 2) Add to a container with anticoagulant and mix. 3) Add an isotonic solution such as saline. 4) Wash by centrifugation 5 min. at 3000 rpm. 5) Discard the supernatant, add saline to the precipitate, mix and repeat 4 and 5. 6) Re-suspend in saline and standardize.

(1) اجمع الدم بالبزل الوريدي. (2) أضفه إلى وعاء فيه مانع تخثر وامزج. (3) أضف محلولاً متساوي التوتر مثل المحلول الملحي. (4) اغسل بالطرد المركزي 5 دقائق بسرعة 3000 دورة/دقيقة. (5) تخلص من الطافي، وأضف المحلول الملحي إلى الراسب، وامزج وكرر 4 و5. (6) أعد التعليق بالمحلول الملحي وعائره.

AR

EN What are the components of Alsever's solution and the role of each?

5

2.05 g dextrose (preservative); 0.8 sodium citrate (anticoagulant); 0.42 g sodium chloride (controls osmotic pressure); 0.054 citric acid (pH control).

2.05 غ دكستروز (مادة حافظة)؛ 0.8 سترات الصوديوم (مانع تخثر)؛ 0.42 غ كلوريد الصوديوم (يتحكم بالضغط الأزموزي)؛ 0.054 حامض الستريك (يضبط الأس الهيدروجيني).

AR

EN Write the steps of the venipuncture procedure.

6

Label the tube; put the tourniquet 3-4 fingers above the site; ask the patient to form a fist; find the vein and clean the position; remove the needle cap; use the thumb to draw the skin tight.

اكتب بيانات الأنبوب؛ ضع الرباط الضاغط فوق الموضع بـ 3-4 أصابع؛ اطلب من المريض قبض يده؛ حدّد الوريد ونظّف الموضع؛ انزع غطاء الإبرة؛ استعمل الإبهام لشدّ الجلد.

AR

EN

List the safety instructions in the immunology laboratory.

7

Wash hands; wear gloves; wear face glasses; wear a clean gown and coats; routine care, cleaning and disinfection of surfaces and equipment; label samples and solutions; do not leave wastes inside the lab — they must be damaged.

AR

غسل اليدين؛ ارتداء القفازات؛ ارتداء نظارات الوجه؛ ارتداء رداء ومعطف نظيفين؛ العناية الروتينية بالأسطح والأجهزة وتنظيفها وتطهيرها؛ وضع الملصقات على العينات والمحاليل؛ عدم ترك النفايات داخل المختبر بل يجب إتلافها.